




Strathkelvin
Instruments

MT200/MT200A ミトセル

MT200/MT200A ミトセルは非常に小さいサンプル容量の呼吸率を計測したいという研究者のリクエストに応じて、発売されました。

ガラス容器の真中に精密なチャンバ - があり、ガラス容器はアセタ - ル製のベ - スにO - リングを仲介してしっかりとねじこまれています。チャンバ - 上部からポリカ - ボネ - ト製のプランジャ - を挿入してセル容量を調整して密封できます。電極は、ベ - スユニット下部より挿入して先端のメンブランがチャンバ - 底部にしっかりと押し込まれ固定されます。チャンバ - の外郭とガラス容器の内側は恒温水を常に循環できるウォ - タ - チャンバ - になっており、本体後部に取水口と排水口があります。ベ - スユニットにはマグネチックスタ - ラ - が組み込まれていてセル内に入れたスピナー - を回転させます。

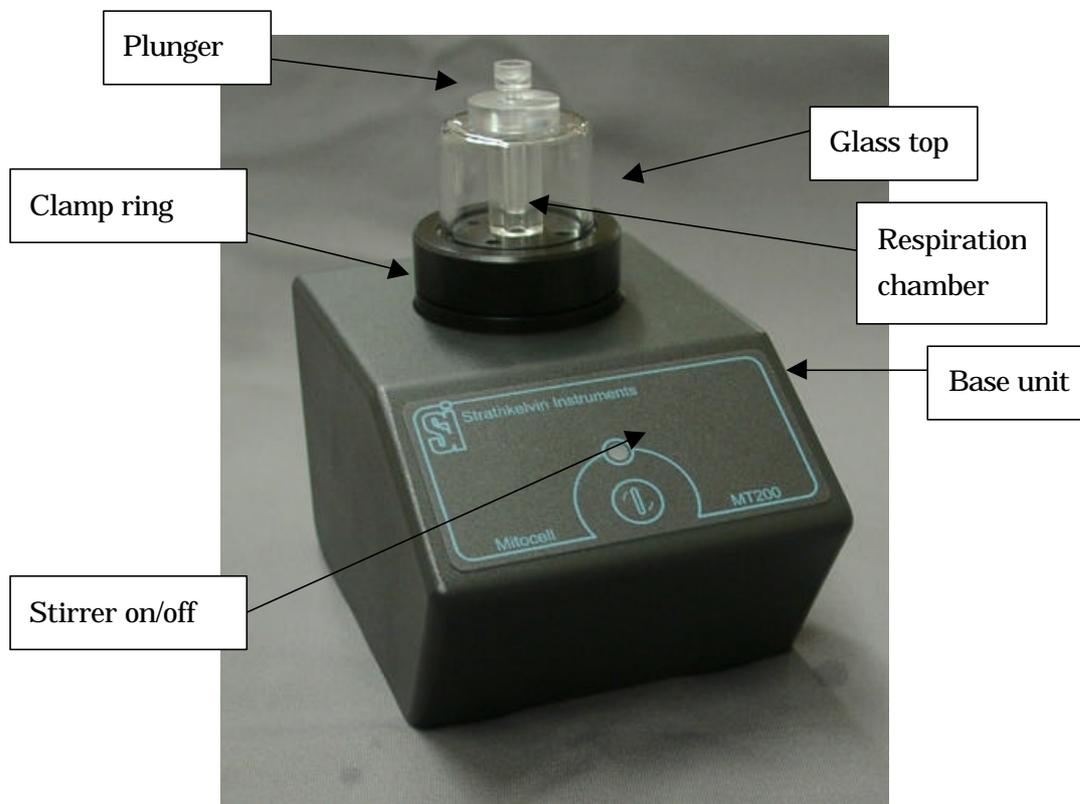

- 特 徴**
- ・チャンバーの容量は50 μ l・100 μ l (MT200)、0.3ml・0.5ml・1.0ml (MT200A)
 - ・マグネチックスタ - ラ - 装備
 - ・セル内部がよく見えるガラス製チャンバ -
 - ・透き通ったポリカ - ボネ - ト製のプランジャ - (セル容量可変ピストン)
 - ・基質と抑制剤をチャンバ - 内に直接注入できる

Strathkelvin 日本総代理店

CT&C 株式会社 シー・ティー・アンド・シー

〒140-0002 東京都品川区東品川1-22-7

Tel. 03-5460-1048 / Fax. 03-5460-1049

email: info@ctandc.co.jp

ホームページアドレス <http://www.ctandc.co.jp>